

Atividade experimental 3

Cubo de Leslie

Objetivos


Verificar a Lei de Steffan-Boltzmann a baixa temperatura e estudar a emissividade das faces de um cubo revestido com diferentes materiais, e comparar diferentes formas de medir temperatura.

Material

- Caderno para registo de dados experimentais
- Cubo de Leslie (faces preta, branca e polida)
- Sensor de radiação térmica (termopilha)
- Placa isoladora
- Fonte de alimentação (10V máx.)
- Milivoltímetro (DC)
- Ohmímetro
- Termopar

Procedimento

Monte o esquema experimental e atente nos cuidados a ter com a tensão e a temperatura no cubo.

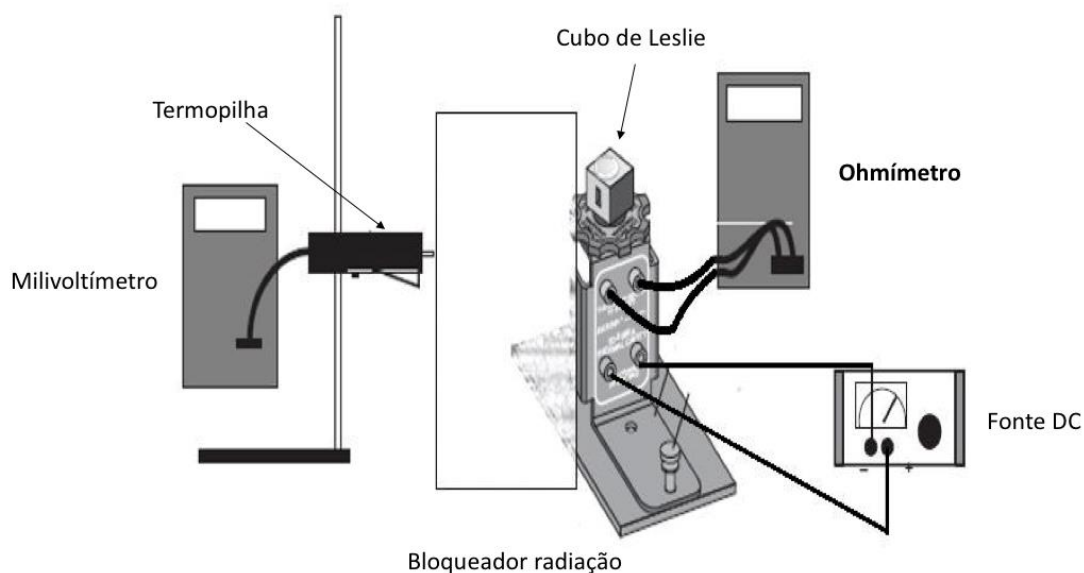

1. Anote a temperatura ambiente com o termopar e meça a resistência do termistor dentro do cubo (terminais brancos). Ajuste uma das faces do cubo de forma que a termopilha fique a apontar para o centro de uma das faces. Preste especial atenção i) à orientação relativa entre a termopilha e a superfície de interesse, e ii) à distância entre ambos.
2. Coloque a placa isoladora com a parte refletora virada para o cubo. Coloque o termopar na cavidade do cubo e monitorize a temperatura.
3. Ligue a fonte de alimentação perto dos 10V e deixe aquecer até aos 40°C.
4. Em intervalos de temperatura definidos (até aos 90°C) e medidos pelo termopar, registre a irradiação incidente na termopilha, a temperatura registada pelo termopar e termistor dentro da cavidade. A cada medida retire a placa isoladora da frente do cubo **somente por 3 segundos**. No ciclo de aquecimento considerar apenas duas das faces.
5. Aproveitando o arrefecimento do cubo, escolha repita as medições na terceira face do ponto anterior de forma descendente (bastando desligar a fonte de alimentação).

Observação:

A temperatura e a resistência do termistor estão relacionadas através da expressão:

$$\frac{1}{T} = A + B \ln\left(\frac{R}{10}\right) + C \left(\ln\frac{R}{10}\right)^2 + D \left(\ln\frac{R}{10}\right)^3$$

$$A = 3.35 \times 10^{-3} \quad B = 2.56 \times 10^{-4} \quad C = 2.38 \times 10^{-6} \quad D = 8.37 \times 10^{-8}$$

Discussão

- Compare os métodos de obtenção da temperatura do cubo.
- Represente graficamente a radiação incidente na termopilha em função de $T_{\text{cubo}}^4 - T_{\text{sensor}}^4$, assumindo que T_{sensor}^4 se manteve constante e igual à temperatura ambiente.
- Como o fator geométrico de perdas não é conhecido, considerar que a superfície mais emissora tem emissividade igual a 1.
- Comente a validade da Lei de Stefan-Boltzmann na gama de temperaturas estudada. Como é que a radiação incidente na termopilha se compara para as diferentes superfícies?
- Compare as emissividades relativas das superfícies estudadas. Comentar a frase “Materiais que são bons absorvedores são maus emissores”?
- Que cuidados específicos tiveram para minimizar a fonte de incertezas e erro?